

MANUAL DEL USUARIO

ELOS ME & LESCOLTON ICECOOL DUAL SYSTEM



INTRODUCCIÓN

- El nuevo Lescolton impulsado por Elos Me es un sistema dual, con la función de depilación y rejuvenecimiento de la piel. Integra la aplicación multiterm de la tecnología óptica de luz electrónica en el campo de la belleza y la salud más un sistema de enfriamiento reforzado.
- Antes de usar, lea atentamente las instrucciones.
- Adecuado para hombres y mujeres.
- Las personas con piel oscura deben comenzar con el nivel más bajo y luego ajustarse al nivel adecuado según la adaptabilidad de su piel.

Contraindicaciones

- Personas menores de 16 años.
- Inflamación de la piel.

- Fotosensibilidad.
- Dispositivo electrónico médico implantado que puede provocar errores de funcionamiento.

Consideraciones

- El producto no ha sido probado en mujeres embarazadas.
- No utilice el producto directamente sobre tatuajes, ya que pueden absorber una gran cantidad de energía.
- No lo use alrededor de los ojos, el cuello o los pezones ya que la piel de estas áreas es relativamente vulnerable.
- Si la piel continúa irritada o inflamada después de 24 horas, suspenda su uso hasta que desaparezcan los síntomas.

Advertencias de Seguridad


- No bloquee las rejillas de ventilación durante el uso.
- No permita que entre agua ni humedad en el dispositivo.
- El uso del dispositivo en condiciones inflamables o explosivas está prohibido.

Reglamento de seguridad operacional

- No apunte la luz a los ojos.
- No mires directamente a la luz.
- Antes de usar, asegúrese de haber eliminado todos los objetos metálicos, como anillos, pulseras, etc., para evitar el mal funcionamiento del dispositivo.
- Utilice la máquina en una habitación con una temperatura inferior a 25 grados centígrados.

Estructura del producto

DETALLES DE PRODUCTO

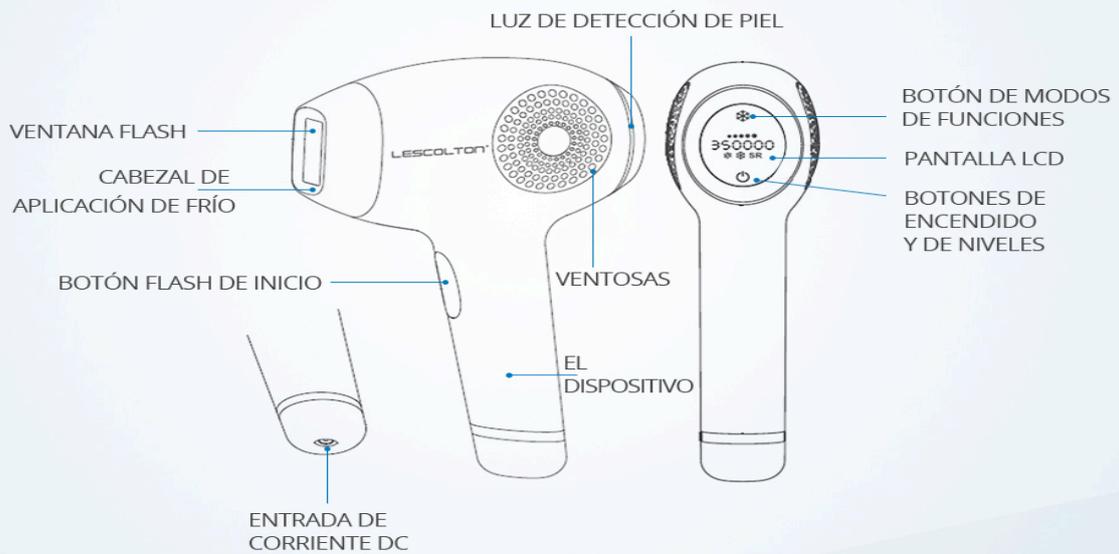

Puede ocurrir alguna tolerancia durante la medición

Especificaciones

Tamaño de la unidad principal: 182x78x151 mm

Tamaño del paquete (caja): 231x191x93mm

Fuente de alimentación: entrada: 100-240V AC-50 / 60Hz

Peso: 1,3 kg

Área de irradiación: 4 cm²

Ambiente externo: Temperatura: - 20 - 50 grados Celsius

Garantía: 4 años de garantía.

Tabla de solución de problemas simple

No hay energía: el cable de alimentación no está bien conectado.

No se puede encender la máquina: presione el botón "encendido" durante 2 segundos.

El indicador de nivel parpadea después del arranque: el cartucho no está bien instalado.

Apagado automático: la máquina se apaga automáticamente después de 5 minutos si no se usa.

Cómo utilizar la máquina



Inmediatamente antes de cada sesión quite con cera preferentemente o rasuradora el vello del área a tratar.

Introduzca el cable de alimentación en la máquina y enchúfela.

Encienda la máquina desde el botón táctil de encendido presionándolo durante 2 o 3 segundos hasta que el dispositivo se encienda.

Con el mismo botón de encendido, seleccione el nivel de potencia deseado. Cada vez que se presione el botón se subirá un nivel de potencia. Si en los niveles más bajos de potencia no siente un cosquilleo o cierta molestia lo mejor será seleccionar el nivel más alto de potencia posible.

Apoye la lámpara sobre la piel y una vez que las luces verdes en los laterales del dispositivo parpadeen presione el botón de disparo que se encuentra en el mango del dispositivo.

Repita disparos sobre la misma área 2 o 3 veces para obtener mejores resultados. Para poder emitir el siguiente disparo será necesario esperar a que las luces verdes del lateral de la máquina parpadeen.

Desde el botón táctil de modo de funciones que encontrará en la parte superior de la pantalla LCD, puede seleccionar el tratamiento deseado, depilación o rejuvenecimiento de la piel.

Modo de disparo automático

Para que la máquina dispare en forma automática sin necesidad de presionar el botón de disparo puede pasar al modo de uso automático.

Para pasar al modo automático, presione el botón de disparo durante dos o tres segundos hasta que se emitan dos pitidos. Así, la máquina emitirá los disparos automáticamente cuando se apoye la lámpara sobre la piel.

Mantenga la lámpara apoyada hasta que se emitan 2 o 3 disparos para obtener mejores resultados.

Para volver al modo de disparo manual será necesario presionar nuevamente el botón de disparo durante 2 a 3 segundos hasta escuchar nuevamente dos pitidos.

Intervalos de tratamiento

Trate cada 3 a 5 días durante el primer mes, semanalmente durante el segundo mes, cada 15 días durante el tercer mes y cada 30 días a partir del cuarto mes y hasta obtener la depilación definitiva.

La depilación definitiva es un proceso de varios meses, los resultados no se ven en forma inmediata por dos razones:

- 1- Es necesario esperar a que todo el vello del cuerpo esté en etapa de crecimiento activo para que pueda ser afectado por el tratamiento. Para esto, es necesario esperar varios meses.
- 2- Es necesario realizar varios tratamiento para el vello que se encuentra en etapa de crecimiento activa para ir debilitando la raíz del vello hasta que la misma se vea definitivamente afectada y el vello no vuelva a crecer.

Los cambios se irán notando con el transcurso de los meses.

Las personas con vello rubio, cano o pelirrojo necesitarán normalmente del doble de sesiones que las personas con vello negro, por lo que el tratamiento se podrá extender entre 6 a 12 meses.

Tratamiento de rejuvenecimiento de la piel

Para este tratamiento será necesario cambiar la lámpara.

Con la máquina apagada, tire de la lámpara para quitarla y coloque la lámpara de rejuvenecimiento.

Una vez colocada la lámpara, siga los mismos pasos para encender el dispositivo, seleccionar el nivel de potencia y disparar tal como explicamos previamente para la depilación definitiva.

Registración de 4 años de garantía

Registre su garantía de 4 años, exclusiva para compras en nuestra tienda online mediante este enlace:

<https://elosme.com/warranty.php>